



## Scanningtisch SCAN<sup>plus</sup> 100 × 100 für aufrechte Mikroskope

### Spezifikationen

Verfahrbereich	max. 100 × 100 mm
Spindelsteigung	4 mm
Verfahrgeschwindigkeit	max. 240 mm/s
Wiederholgenauigkeit	≤ 0,2 µm <sup>1</sup>
Genauigkeit	±1 µm <sup>2</sup>
Auflösung	0,05 µm (kleinste Schrittweite)
Orthogonalität	< 10 arcsec
Motortyp	2-Phasen Schrittmotor
Endschalter	stufenlos einstellbare Lichtschranken
Material / Oberfläche	Aluminium / Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	ca. 4,6 kg


### Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-24-575-0000

### Produktmerkmale

- ▶ integrierte lineare Messsysteme für höchste Genauigkeit
- ▶ flaches, ergonomisches Design mit abgerundeten Kanten
- ▶ geschlossene Oberfläche zur besseren Reinigung
- ▶ anwendungsbezogenen auswechselbare Tischeinlagen
- ▶ stufenlos einstellbare Lichtschranken zur individuellen Verfahrsbegrenzung
- ▶ elektronisches Typenschild ETS zur automatischen Erkennung des Scanningtisches und Parametrisierung der Steuerung
- ▶ **5 Jahre Garantie**, sofern der Scanningtisch im System mit der Märzhäuser-Steuerung TANGO betrieben wird

### Abmessungen

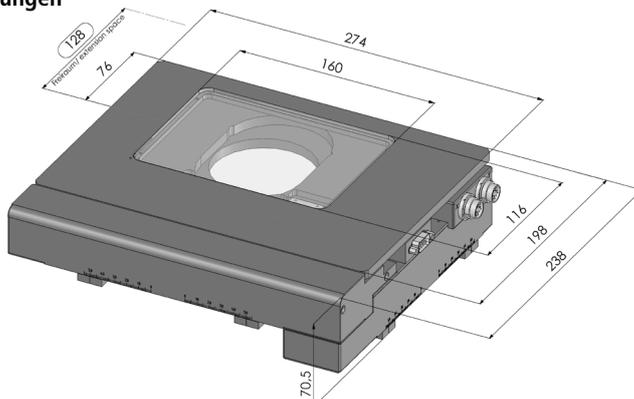

### Zubehör

Glaseinlegeplatte (im Lieferumfang enthalten)  
 Bestell-Nr.: 00-24-427-0810

Weiteres Zubehör finden Sie unter:  
[www.marzhauser.com](http://www.marzhauser.com)